


3-TEX® Lumbo



Ref.: 6211 CORTA

Ref.: 6212 ALTA

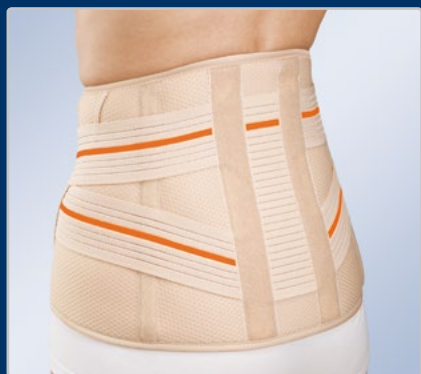

FAJA SACROLUMBAR

Características:

Confeccionada en tejido tricapa (algodón - espuma - poliéster), semirrígido y transpirable, especialmente diseñado para obtener una máxima transpiración. Sistema de cierres de fácil y cómoda adaptación, que permite el ajuste personalizado a cada paciente en velcro. Las bandas elásticas permiten regular la tensión selectiva aplicada a cada zona. Solapas laterales diseñadas para facilitar la colocación de la faja. Sistemas de cierres con lengüeta libre sin adherente para facilitar su despegue en velcro. Refuerzos posteriores mediante 4 ballenas siendo las 2 centrales extraíbles permitiendo variar la rigidez y la forma de ambas ballenas. Ballenas delanteras para mayor consistencia y sujeción abdominal.

Efectos:



Fuerte sujeción lumbar, porte cómodo y tacto suave gracias a su tejido semielástico transpirable.

Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Procesos degenerativos.
- Debilidad y atonía muscular.
- Hernias discales.
- Postoperatorio.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM		
1	80-90	TROCÁNTER	
2	90-100	ALTURA DELANTERA	 18 cm (6211) 24 cm (6212)
3	100-110		
4	110-120	ALTURA TRASERA	 28 cm (6211) 33 cm (6212)
5	120-132		