


3-TEX® Lumbo



Ref.: 6214

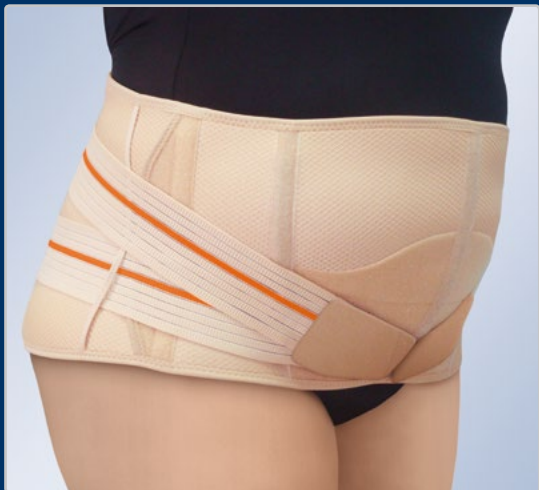

FAJA SACROLUMBAR ABDOMEN PÉNDULO

Características:

Confeccionada en tejido tricapa (algodón - espuma - poliéster), semirrígido y transpirable, especialmente diseñado para obtener una máxima transpiración. Sistema de cierres de fácil y cómoda adaptación, que permite el ajuste personalizado a cada paciente en velcro. Las bandas elásticas permiten regular la tensión selectiva aplicada a cada zona. Solapas laterales diseñadas para facilitar la colocación de la faja. Sistemas de cierres con lengüeta libre sin adherente para facilitar su despegue en velcro. Refuerzos posteriores mediante 4 ballenas siendo las 2 centrales extraíbles permitiendo variar la rigidez y la forma de ambas ballenas. Ballenas delanteras para mayor consistencia y sujeción abdominal. Configurada especialmente con forma anatómica para abdomenes prominentes.

Efectos:

Fuerte contención y apoyo dorsolumbar, porte cómodo y tacto suave gracias a su tejido semielástico transpirable.

Indicaciones:

- Lumbalgias.
- Procesos degenerativos.
- Debilidad y atonía muscular.
- Hernias discales.
- Postoperatorio.
- Abdomenes prominentes.

Color:

- Beige.

TALLAS	PERÍMETRO CM	ABDOMEN	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	90-100			
2	100-110			26 cm
3	110-120			
4	120-132			28 cm
5	132-144			