

Neuro-Conex®



Ref.: 94303D DCHA

Ref.: 94303I IZDA



SOPORTE DE HOMBRO CON CINCHA DE BRAZO Y ANTEBRAZO

Características:

Ortesis confeccionada con foam transpirable en velour por su cara exterior y forro interior de tejido de panal, sistemas de cierre mediante cinchas en microgancho y hebillas con cierre de apertura de botón. La hombrera se encuentra reforzada mediante un alma termoplástica de 0.5mm de espesor con la finalidad de aumentar su capacidad de soporte, evitando su deformidad y permitiendo a la vez una adaptación personalizada.

La tracción / suspensión del brazo se puede realizar optando por el modelo Ref.: 94303 que incluye codera para realizar la tracción de brazo y antebrazo y la Ref.: 94304 que incorpora soporte de antebrazo.

Ambos modelos incluyen en su interior relieve de silicona para evitar deslizamientos.

Su diseño permite la libre actividad de las funciones del brazo, permitiendo la colocación por el propio paciente con una sola mano.

Efectos:

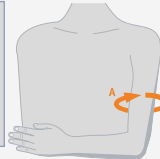
Estabilización de la articulación del hombro.
Control de la subluxación y rotación interna del hombro.
Como métodos de reducción de las tensiones, capsulo-ligamentosas en hombros con parálisis o inestables.
Prevención del dolor y subluxación.

Indicaciones:

- Lesiones neurológicas de miembro superior.
- Lesiones del plexo braquial con parálisis de hombro y brazo.
- Hemiplejías producidas por un ictus.
- Lesiones de los nervios periféricos y traumatismos cerebrales.
- Hombro doloroso e inestable.
- Para la subluxación de hombro.

Color:

- Negro.

TALLAS	1	2	3	CIRCUNFERENCIA EN CM 
PERÍMETRO CM	22,5-28	28-34	34-40	