



# Collarín cervical

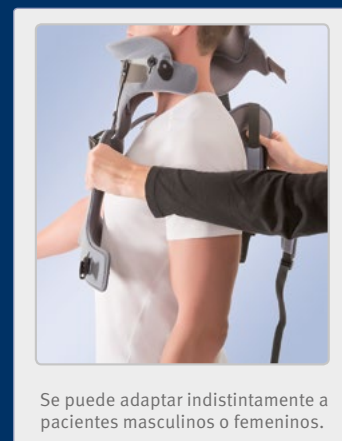

Se puede adaptar indistintamente a pacientes masculinos o femeninos.

Ref.: CC2800

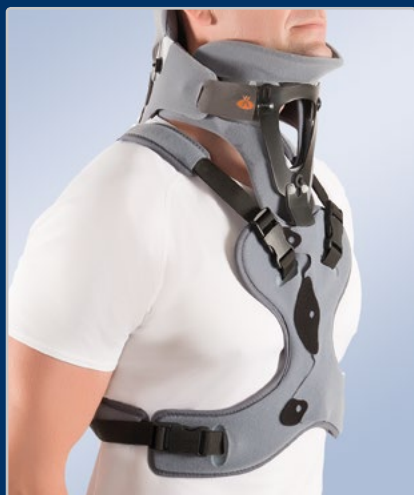

## COLLARÍN CERVICAL BIVALVO CON SOPORTE TORÁCICO

### Características:

Las actividades cotidianas obligan a realizar esfuerzos complejos a la columna cervical, sometiéndola a fuerzas de compresión, flexión y torsión: por lo tanto, para conseguir una correcta inmovilización, es imprescindible evitar tanto los movimientos de flexo-extensión como los de rotación y lateralización, consiguiendo a la vez una descarga de la presión sobre los discos intervertebrales. Con el fin de poder tratar lesiones que requieran la inmovilización y descarga de la columna cervical, se ha diseñado la ortesis cervicotorácica, compuesta por dos módulos; uno superior (Ref.: CC2600. Ortesis bivalva occipitomentoniana) y otro inferior (Ref.: CC2700. Extensión torácica) provisto de dos placas: una anterior con apoyo en manubrio esternal y otra posterior con apoyo en columna dorsal.

Los módulos superior e inferior se encuentran unidos entre sí por unas pletinas de aluminio (Ref.: CC2701) que permiten regular la ortesis longitudinalmente, adaptándola a las particularidades físicas de cada paciente. Ambas placas quedan ensambladas a través de unos cierres ajustables que unen la placa anterior a la posterior. La ortesis está confeccionada en polietileno de baja densidad y dispone de un forro interior de foam acolchado y forro exterior de velour, que incrementa la sensación de confort, evitando así la aparición de rozaduras por presión.

Los materiales utilizados en su fabricación permiten la realización de radiografías.

### Indicaciones:

- Lesiones y traumatismos de la columna cervical que requieran para su tratamiento la inmovilización de los segmentos C1 a T1.
- Protección postoperatoria.
- Metástasis óseas.

### Color:

- Gris.

### Observaciones:

Diseño unisex.

TALLAS	PERÍMETRO CM
1	30-35
2	35-40
3	40-45

