


Marco de Hiper-Extensión Jewett

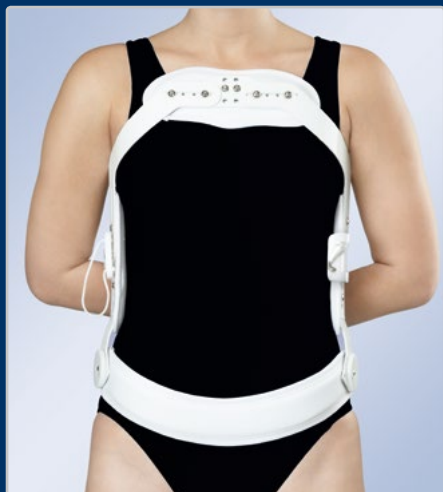

Ref.: J001

Ref.: J002 CORTO

Ref.: J001A

Ref.: J002A CORTO



MARCO DE HIPER-EXTENSIÓN JEWETT MARCO DE HIPER-EXTENSIÓN JEWETT ARTICULADO

Características:

3 puntos de apoyo (pectoral, suprapúbico, dorsolumbar). Estructura de aluminio ligera. Placa esternal móvil. Regulación de la altura al nivel de las placas de control lateral. Placa de tensión dorsolumbar regulable por banda y sistema de cierre. Placas acolchadas para mayor confort. La banda pélvica puede dejarse fija o basculante, para adaptarse a distintos posiciones del paciente. J001A: Se ha diseñado un nuevo modelo provisto de sistema de regulación de la inclinación del apoyo pectoral, pudiendo regularse en 5 posiciones en intervalos de 20°.

Indicaciones:

- Fracturas por aplastamientos. Dolores vertebrales por causa de metástasis secundarias. Espondiloartrosis asociada o no a una esclerosis artrósica. Lumbalgias, lumbociáticas, y dorsalgia crónicas. Inmovilización a medio-termino después de la cirugía de disco intervertebral. Fracturas vertebrales estables de la columna dorsal baja y de la columna lumbar. Inmovilización a medio-termino después de la cirugía de disco intervertebral. Cuidado ortopédico temporal después de la cirugía de las fracturas de los cuerpos vertebrales inestables. Cuidado ortopédico permanente después de la cirugía de tumores y metástasis de los cuerpos vertebrales. Cuidados posquirúrgicos después de la cirugía de la columna por descompresión con o sin fijación interna.

Color:

Blanco.

Modelos disponibles:

J001: Marco Jewett.

J001A: Marco Articulado Jewett.

J002: Modelo Corto.

Ref.: J001 / J001A


TALLAS	CONTORNO PÉLVICO	ALTURA*
1	60-75	39-46
2	75-90	42-49
3	90-105	45-52
4	105-115	49-56

*Entre la almohadilla esternal y la parte baja de la banda pélvica.

Ref.: J002 / J002 A

TALLAS	CONTORNO PÉLVICO	ALTURA*
2	75-90	39'5-43'5
3	90-105	42-49
4	105-115	45'5-52'5

*Entre la almohadilla esternal y la parte baja de la banda pélvica.

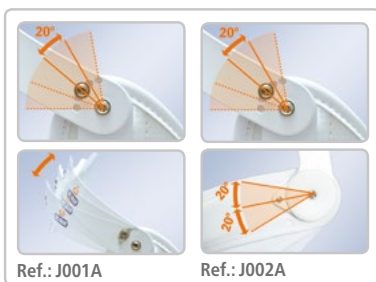

Ref.: J001A

Ref.: J002A