

Plantilla especial para pie diabético/úlceras



Ref.: PANW

PLANTILLA ESPECIAL PARA PIE DIABÉTICO/ÚLCERAS (ESPECIAL WALKERS)

Características:


Compuesta por una base de velour dotada de una lámina adhesiva en micro gancho sobre las que se pega una plantilla compuesta por celdas cuadradas de material uretano (EVA) de 10 mm de espesor con memoria lenta, cuya función es aliviar y disminuir las zonas de presión que se desee y forro de PORON, (anti-choques) que proporcionan flexibilidad y capacidad de absorción de cargas e impactos.

Indicaciones:

- Ulceraciones plantares en talón y antepié.
- Neuropatías con riesgo de ulceraciones plantares.
- Pie diabético.
- Post-operatorios.
- Verrugas plantares intervenidas.
- Heridas plantares.

Color: ■ Granate / ■ Negro.

Unidades: 1.

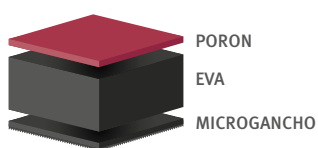

TALLAS	Nº DE CALZADO
1	32-38
2	38-42
3	42-46

Función:

Al tratarse de una plantilla compuesta por un gran número de celdas cuadradas móviles nos permite retirar aquellas coincidentes con la zona ulcerada o área que precise aliviar presiones. Dado que las úlceras pueden ser recurrentes y tener localización variable nos permite reponer y/o retirar las celdillas según el posicionamiento y proceso de curación de las úlceras, variando los puntos de presión según necesidad. Nos proporciona una reducción de las fuerzas de presión y carga de hasta un 60% en todas las fases de carga estática o dinámica.