


Star Brace® Dynamic



Ref.: SD100

Ref.: SD101 ALTA

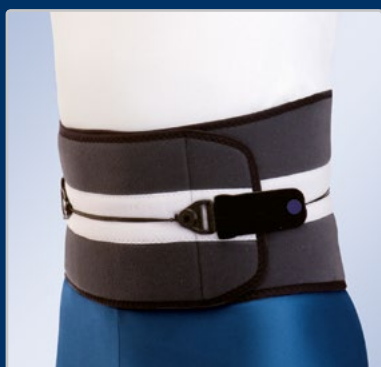

FAJA SEMIRRÍGIDA STAR BRACE® DYNAMIC

Características:

La faja Star Brace® Dynamic, consiste en una ortesis sacrolumbar semirrígida fabricada en material transpirable bicapa compuesto en tejido de velour en poliamida e interior de tejido Poromax® cuyas características son las de facilitar la ventilación y absorción de la humedad a la vez que incorpora un exclusivo tratamiento antibacterias “Thermy-tex”, evitando el desarrollo de bacterias causantes de los malos olores. La zona lumbar incorpora en su cara interior almohadilla lumbar en termoplástico, de la misma zona por su cara exterior, posee un marco termoplástico provisto de un sistema de poleas, que al traccionar los cordones ejercen una compresión selectiva de la zona lumbar y abdominal, permitiendo la regulación de la compresión a voluntad. Las lengüetas de cierre de las cordonerías se encuentran diferenciadas por un color para facilitar la colocación y retirada de la ortesis. Sistema de cierre en microgancho.

Indicaciones:

- Lumbago, lumbociática, procesos degenerativos, atonía y debilidad muscular, tratamientos pre y post-quirúrgicos, hernias discales, espondiloartrosis, espondilolisis, fuerte sujeción sacrolumbar, perfecta adaptación anatómica y comodidad en su uso diario.

Color:

- Gris.

Modelos disponibles:

- SD100: Faja semirrígida corta.
- SD101: Faja semirrígida alta.

TALLAS	PERÍMETRO CM	TROCÁNTER	ALTURA DELANTERA	ALTURA TRASERA
1	75-85			
2	85-95			
3	95-110		18 cm (SD100) 23 cm (SD101)	
4	110-125			27 cm (SD100) 32 cm (SD101)